


MESSUNG TRAGEPOSITION OHNE MESSAUFSATZ • LEITFADEN

1

Aktivieren Sie die Funktionen ohne Messaufsatz und Trageposition

Die Funktion Trageposition ohne Messaufsatz ermöglicht es Ihnen Messungen ohne Messaufsatz durchzuführen, einschließlich Verte Panto und FSW

Schalten Sie ohne Messaufsatz und Trageposition ein.

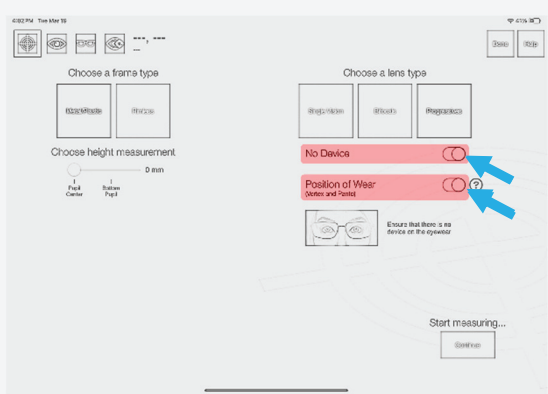

2

Bereiten Sie den Kunden auf den Aufnahmeprozess vor

Positionieren Sie den Kunden in seiner natürlichen Haltung mit Hilfe von Standard-Optikertechniken. Um einen reibungslosen Aufnahmeprozess zu gewährleisten, informieren Sie den Kunden über die bevorstehenden Aufnahmeschritte.

Empfehlen Sie dem Kunden:


- Erwarten Sie einen Kamerablitz des iPads,
- Eine Bewegung des iPads nach unten,
- Einen zweiten Kamerablitz des iPads.

Fordern Sie den Kunden auf, dem iPad mit den Augen zu folgen, während er den Kopf während der Abwärtsbewegung stillhält und darauf wartet, dass der 2. Blitz erfolgt, bevor er seine Haltung lockert.


3

Erfassen Sie die Messbilder

- 1 • Stellen Sie sicher, dass der Kunde während des Bildaufnahme Prozesses seine natürliche Haltung beibehält.
- 2 • Halten Sie das Tablet vertikal vor das Gesicht des Kunden, während Sie sicherstellen, dass der Kunde seine Haltung beibehält.
 - Überprüfen Sie den iPad-Kippindikator, um sicherzustellen, dass die Neigung im grünen Bereich liegt.
- 3 • Stellen Sie sicher, dass die Kinnkontur mit der Kontur des Gesichts des Kunden übereinstimmt.
 - Passen Sie die Entfernung zwischen iPad und Kunde sowie die Position des iPads bei Bedarf an.
- 4 • Weisen Sie den Kunden an, in das Kameraobjektiv zu schauen, während er **seine Kopfhaltung beibehält**.
 - Tippen Sie auf die Schaltfläche "Foto aufnehmen", um das erste Bild aufzunehmen.

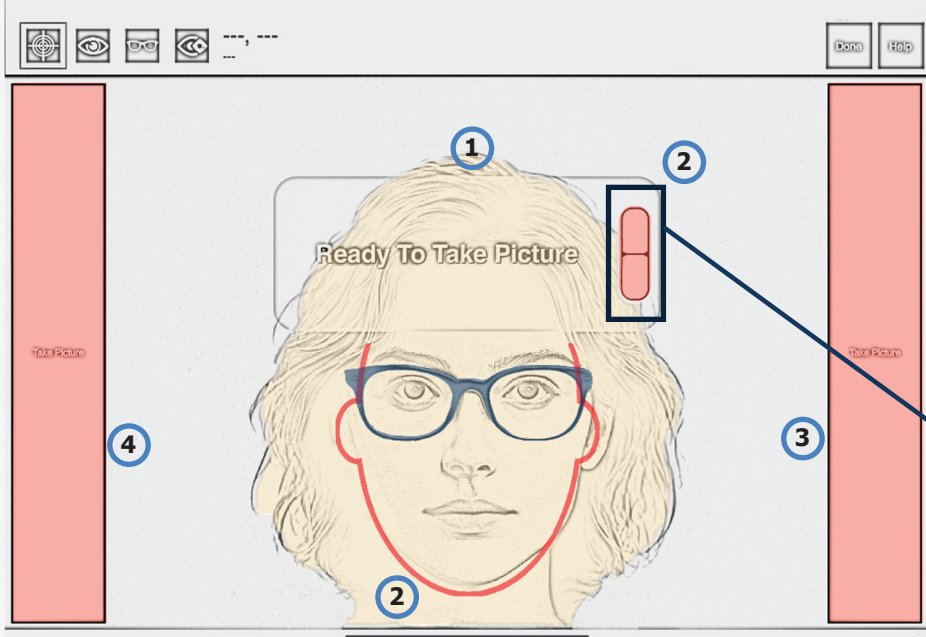

- 5 • Verschieben Sie das iPad nach unten, bis die neue Kinnkontur mit der Kontur des Kundengesichts übereinstimmt, während Sie sicherstellen, dass der Kunde seine Kopfhaltung beibehält und das iPad vertikal bleibt.
 - Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um das zweite Messbild aufzunehmen.

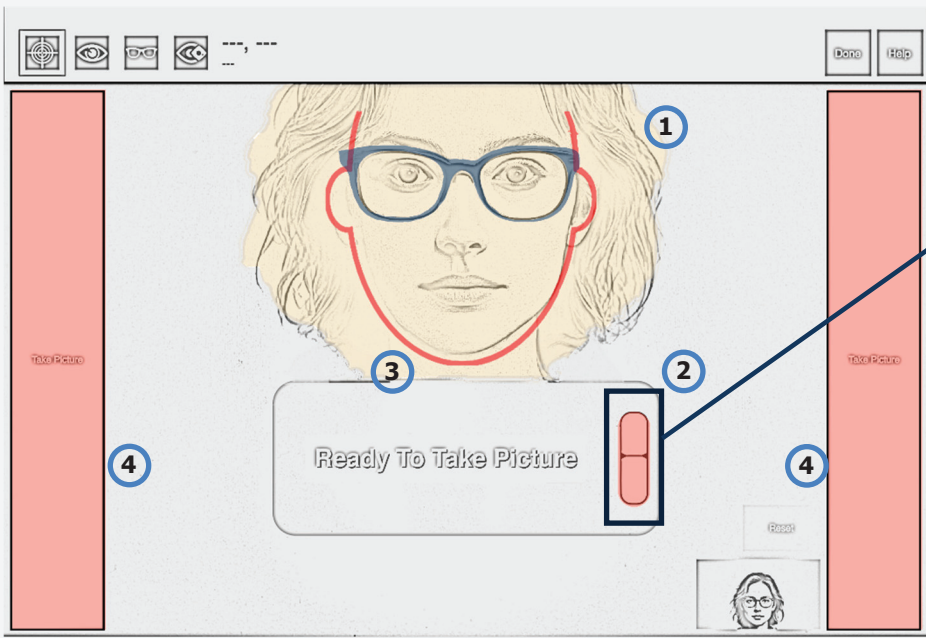


4

Überprüfen Sie die Positionen der Marker

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und überprüfen Sie die Position der Marker.


- 1 • Stellen Sie sicher, dass der Brückenmarker in beiden Bildern oben in der Mitte der Brücke platziert ist.
- 2 • Stellen Sie sicher, dass die Pupillenmarker auf den Pupillenreflexen zentriert sind.
- 3 • Stellen Sie sicher, dass die horizontalen und vertikalen Linienmarker dort platziert sind, wo die Linse auf den Rahmen trifft, in ihren jeweiligen Bildern.

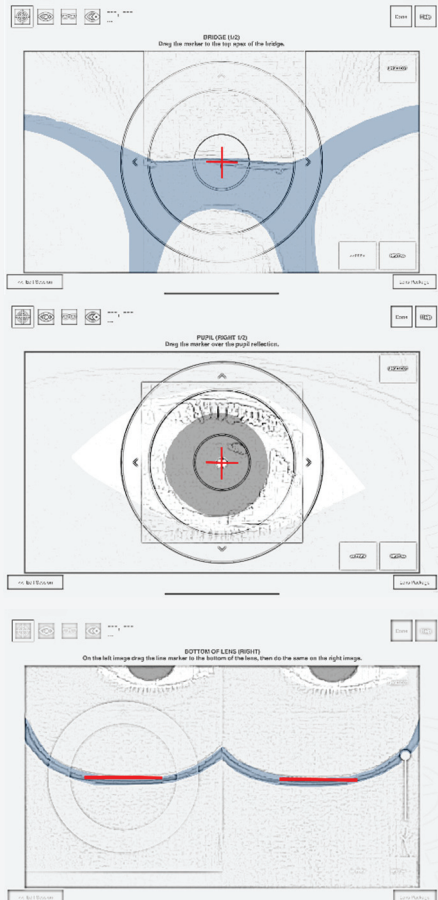

5

Messen Sie die Fassungsseibenwinkel (FSW)

- 1 • Tippen Sie auf den Text FSW, um die Messung der Fassungsseibenwinkel zu beginnen.
- 2 • Platzieren Sie der Fassung auf einer leeren Oberfläche.
 - Halten Sie das iPad waagrecht über der Fassung und passen Sie den Abstand so an, dass die Umrisse mit denen der Fassung übereinstimmen.
 - Erfassen Sie das Bild, wenn Sie bereit sind.

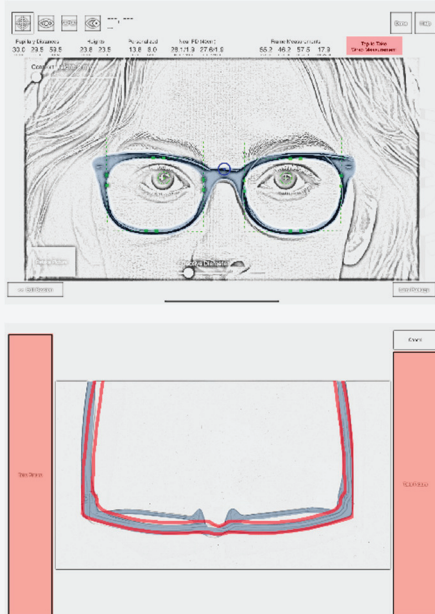

- 3
 - 1 • Platzieren Sie die blauen Punkte an den äußeren Kanten jeder Linse.
 - 2 • Stellen Sie den "Schiebereglers für der FSW" so ein, dass die weiße Linie in Richtung der inneren Kante jeder Linse verläuft.
 - 3 • Tippen Sie auf "Abwählen", um die Messung der FSW abzuschließen.

