


1

Activer les modes de mesure Sans Dispositif de Posture et de la Position de Port

Le mode Sans Dispositif de Posture avec la Position de Port vous permet de capturer toutes les mesures sans le dispositif de posture, incluant la distance vertex, l'angle pantoscopique ainsi que le galbe.

Sélectionnez les options sans dispositif de posture et Position de port.

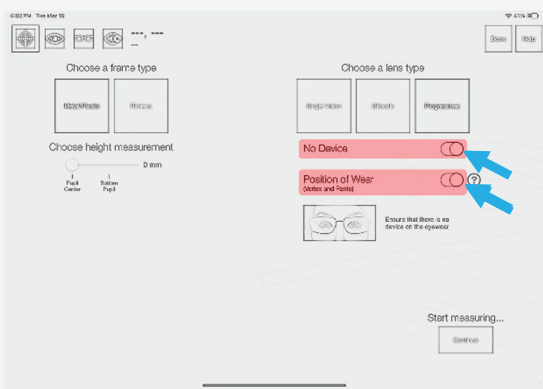

2

Préparer le client pour le processus de prise de la photo

Positionner le client dans sa posture naturelle en utilisant des techniques opticiennes standard. Pour garantir un processus de prise de photo fluide, informez le client des étapes à venir pour la prise de la photo.

Informez le client de s'attendre à :


- Un flash de l'appareil photo de l'iPad,
- Un mouvement vers le bas de l'iPad,
- Un deuxième flash de l'appareil photo de l'iPad.

Demandez au client de suivre l'iPad avec les yeux tout en maintenant la tête immobile pendant le mouvement vers le bas et d'attendre le deuxième flash avant de relâcher sa posture.


3

Capturer les images de mesure

- 1 • Veillez à ce que le client maintienne sa posture naturelle tout au long du processus de capture d'image.
- 2 • Tenez la tablette verticalement devant le visage du client tout en veillant à ce que le client maintienne sa posture. Vérifiez l'indicateur d'inclinaison de l'iPad pour vous assurer que l'inclinaison se situe dans la zone verte.
- 3 • Assurez-vous que le contour du menton correspond au contour du visage du client. Ajustez la distance entre l'iPad et le client ainsi que la position de l'iPad si nécessaire.
- 4 • Demandez au client de regarder dans l'objectif de l'appareil photo tout **en maintenant sa posture**. Appuyez sur le bouton « Prendre Photo » pour capturer la première image.

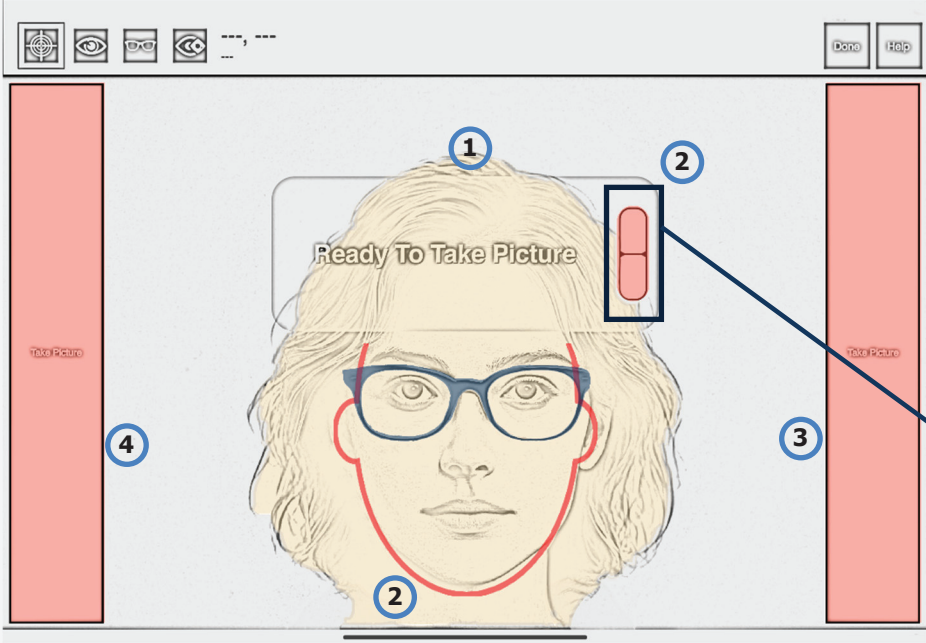

- 5 • Déplacez l'iPad vers le bas jusqu'à ce que le nouveau contour du menton corresponde au contour du visage du client, tout en veillant à ce que le client maintienne sa posture et que l'iPad soit vertical. Répétez les étapes 1 à 4 pour capturer la deuxième image de mesure.

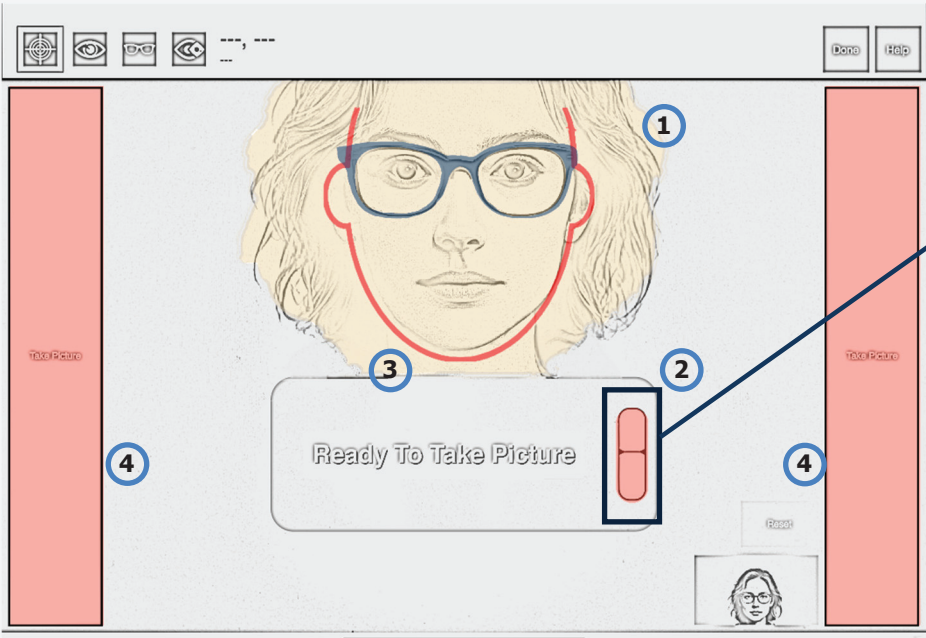


4

Vérifier les positions des marqueurs

Suivez les étapes à l'écran et vérifiez la position des marqueurs.


- 1 • Vérifiez que le marqueur du pont est situé au centre supérieur du pont dans les deux images.
- 2 • Vérifiez que les marqueurs des pupilles sont centrés sur le reflet cornéen dans la pupille.
- 3 • Vérifiez que les marqueurs des lignes horizontales et verticales sont placés là où le verre rencontre la monture dans leurs images respectives.

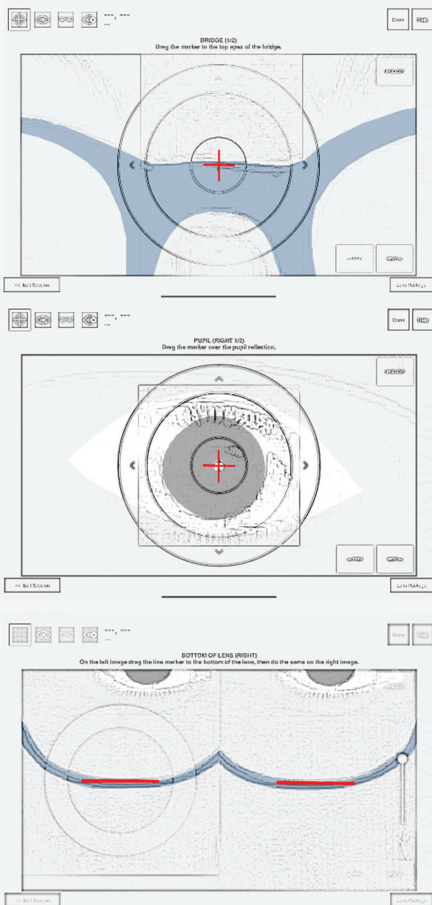

5

Mesurer le Galbe de la Monture

- 1 • Appuyez sur le texte « Appuyez ici pour prendre la mesure du galbe » pour commencer la session de mesure du galbe.
- 2 • Placez la monture sur une surface vide. Tenez l'iPad horizontalement au-dessus de la monture et ajustez la distance pour que le contour corresponde au contour de la monture. Capturez l'image lorsque vous êtes prêt.

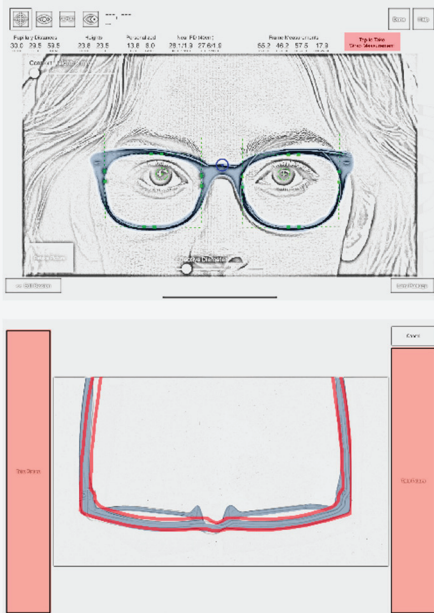

- 3 1 • Placez les points bleus sur les bords extérieurs de chaque verre.
- 2 • Ajustez le curseur de « l'Angle du Galbe » pour que la ligne blanche s'étende vers le bord intérieur de chaque verre.
- 3 • Appuyez sur « Désélectionner » pour compléter la mesure du galbe.

